

EmoKit watch OS SDK

检测心率获取情绪结果


1.	概述	2
2.	导入 SDK	2
3.	初始化配置	3
4.	心率检测并获取情绪结果	3
6.	附录	5




1. 概述

此 sdk 是 watch OS 的 sdk,需要在 watch Extension 扩展里使用。可实现 apple watch 光学检测心率,并获取依据心率识别出的情绪结果。

2. 导入 SDK

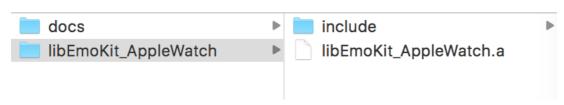

添加 libEmoKit AppleWatch 文件夹,注: 需添加入 Watch Extension

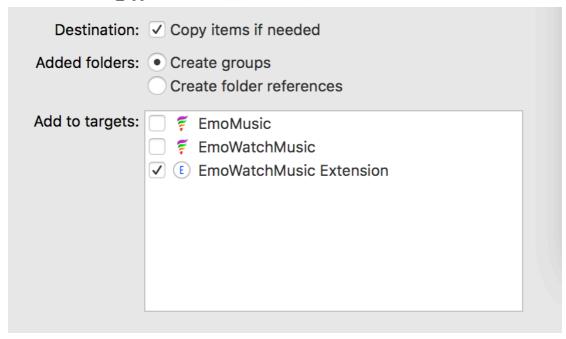

若是在 ios9 SDK 下编译,需在 plist 文件添加如下配置:





3. 初始化配置

初始化时候需要配置从开发者中心(http://dev.emokit.com/)申请的 AID 和 KEY。然后在 watch Extension 扩展的 ExtensionDelegate.m 文件里的 applicationDidFinishLaunching 方法里添加如下代码:

[WKEmoKitManager startAppKey:申请的 Key AppId:申请的 Aid];

4. 心率检测并获取情绪结果

导入头文件,#import "EMWKHeartRateEmoManager.h", 调用如下方法开始心率检测获取情绪

```
/**

开始心率检测并获取对应的情绪结果

@param:rc_type, nil时默认为7种情绪

rc_type=1, 返回24种情绪

rc_type=2, 返回7种情绪

rc_type=3, 返回5种情绪

*/

+
(void)beginGetEmoByHeartRateDetection:(id<EMWKHeartRateEmoManage rDelegate>)delegate rc_type:(NSString *)rc_type;
```

在应用停止检测心率或者检测心率界面消失时,需调用-(void)stopDetecting,否则检测心率的活动可能一直还在进行中

```
/**
停止检测心率(注:在应用停止检测心率或者检测心率界面消失时应调用此方法停止心率检测,否则检测心率的活动可能一直还在进行中)
*/
+ (void)stopDetecting;
```

EmoKit



实现 EMWKHeartRateEmoManagerDelegate 协议的

@required

- (void)responseHeartRateEmoResult:(NSDictionary *)dic;返回的结果数据中,key:rc_main 为情绪代码,此方法是必须实现的,用于获取心率检测的情绪结果。

另外还提供了三个可选的协议方法

@optional

/**

检测的心率值,每检测更新一个心率值,调用一次

- (void) updateHeartRateValue: (NSInteger) value;

/**

心率检测的状态更新

*/

- (void) queryUpdateState: (EMWKQueryUpdateState) state;

EMWKQueryUpdateState 状态值更新时,此协议方法会调用,状态值类型有:

EMWKQueryUpdateStateNOAutho: 用户没有授权,需提示用户在设置->隐私 里打开授权

EMWKQueryUpdateStateQuerying: 心率检测中 EMWKQueryUpdateStateAnalying: 情绪分析中 EMWKQueryUpdateStateFinished: 检测结束

/**

心率检测中的倒计时(注:由于在后台时无法继续检测心率,此倒计时作为检测的大概剩余时间参考值

比较合适,检测结束以EMWKQueryUpdateStateFinished为主)

- (void) queryingCountdownSecond: (NSInteger) sencond;



6. 附录

(1) 错误码列表

错误值	含义
200	结果返回成功

(2) 情绪识别结果码表(7种)。

注: 5 种、24 种情绪结果详见情绪结果码表文档

标签代码	情绪指	英文			
K	平静;	放松;	专注;	出神;	Calm
D	忧愁;	疑惑;	迷茫;	无助;	Confused
C	伤感;	郁闷;	痛心;	压抑;	Sad
Y	生气;	失控;	兴奋;	宣泄;	Angry
M	开心;	甜蜜;	欢快;	舒畅;	Нарру
W	害怕;	焦虑;	紧张;	激情;	Surprised
T	厌恶;	反感;	意外;	惊讶;	Disgust

(3) 联系方式

feedback@emokit.com